


Stadiometer zur Wandmontage mit Display im Kopfschieber

seca 264

- + Wandmontage: Absolut stabile und wackelfreie Größenmessung
- + Perfektionierte digitale Größenmessung: komfortabel und präzise
- + Präzises Ausrichten des Kopfes mit der Positionierungshilfe für die Frankfurt Linie
- + Kopfschieber mit hinterleuchteter Digitalanzeige für komfortables Ablesen
- + Rutschfeste Fußmatte mit Fersenanschlag für eine optimale Dreipunktmessung
- + Inklusive Fersenanschlag für eine optimale Dreipunktmessung

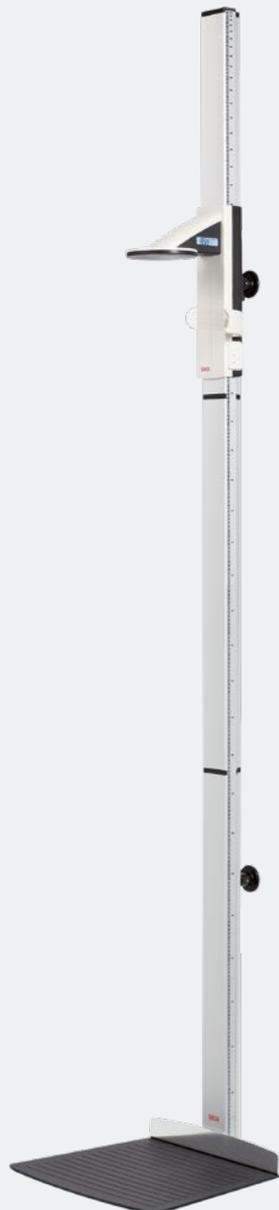

seca 264

Stadiometer zur Wandmontage mit Display im Kopfschieber



Komfortabel, schnell und fehlerfrei die Größe bestimmen

So sieht die perfekte Größenmessung mit dem Stadiometer seca 264 aus: Die Füße des Patienten am Fersenanschlag ausrichten den Kopfschieber mit Bremstaste auf den Scheitel führen. Der Kopf wird dank der Positionierungshilfe für die Frankfurt Linie perfekt horizontal ausgerichtet. Die Größe kann direkt am Display im Kopfschieber abgelesen werden.

Hochstabile Wandmontage für präziseste Größenmessung

Mit zwei Halterungen wird die Säule aus maßgefertigten Aluminiumprofilen fest mit der Wand verbunden. Dadurch erhält das Stadiometer seca 264 eine extrem hohe Stabilität, die das Messen der Größe besonders leicht und komfortabel macht. Der digitale Größenschieber verfügt über die seca Frankfurt Linie, mit der die Ausrichtung des Kopfes besonders präzise gelingt.



Ultra-stabiles Wandstadiometer für die perfekte Größenmessung

Die Montage an der Wand verleiht dem Stadiometer seca 264 eine enorme, unverrückbare Stabilität. Zusammen mit dem Fersenanschlag und der Positionierungshilfe kann der Patient exakt positioniert und die Körpergröße schnell, komfortabel und hochpräzise bestimmt werden. Das Messergebnis wird am Display des Kopfschiebers abgelesen.

Messbereich	30 – 220 cm
Teilung Messbereich	1 mm
Maße (BxHxT)	428 × 2.318 × 474 mm
Maße Plattform (BxHxT)	430 × 3 × 370 mm
Eigengewicht	5 kg
Stromversorgung	Batterien
Funktionen	HOLD, RESET, Abschaltautomatik, Kalibrierung / automatische Kalibrierung, Freie Nullpunktwahl

Medical Device Regulation (MDR) zertifiziert

Änderungen bleiben vorbehalten.

seca deutschland
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg
Deutschland

T 0800 20 00 005 Deutschland
T 00800 20 50 50 50 Österreich
F +49 40 20 00 00 50
E insidesales.de@seca.com

seca ag schweiz
Schönmattdammstrasse 4
4153 Reinach
Schweiz

T +41 61 711 03 00
E info.ch@seca.com

Präzision für die Gesundheit

[seca.com](https://www.seca.com)